



TARGET

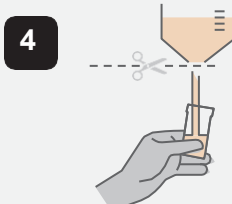
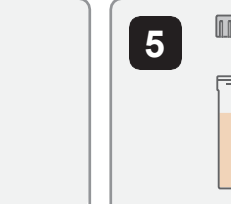
Keep Antibiotics Working



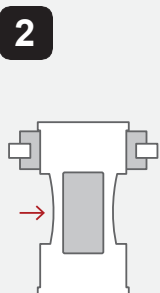
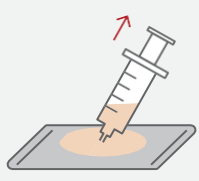
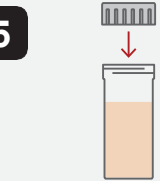
Как да вземете проба от урина с помощта на подложки или бебешки колектори за урина

За бебета и малки деца

Бебешки колектори за урина

1 	2 	3 	4 	5 
Измийте ръцете си със сапун и вода преди и след вземането на пробата.	Почистете и подсушете гениталната област на детето.	Залепете торбичката на колектора здраво върху кожата около гениталиите, след което сложете памперс.	Когато детето приключи с уринирането, измийте ръцете си, внимателно махнете колектора, отрежете в ъгълчето му и излейте урината в стерилния контейнер. Не допускайте колектора да има контакт с вътрешната част на контейнера.	Поставете капака върху контейнера и го затегнете добре.

Подложки за събиране на проби от урина

1 	2 	3 
Измийте ръцете си преди и след събирането на пробата.	Поставете подложката вътре в памперса и оставете детето да носи този памперс по обичайния начин. Проверявайте подложката на всеки 10 минути, за да видите дали е мокра. Не оставайте подложката вътре в памперса за повече от 30 минути, тъй като това увеличава риска от попадане на микроби в пробата.	Започвайте тази процедура отново с нова подложка на всеки 30 минути или ако детето се изходи по голяма нужда, докато то уринира върху нея.
4 	5 	6 
Измийте ръцете си преди да махнете подложката. Използвайте предоставената спринцовка, за да изтеглите урината от подложката и да я прехвърлите в стерилния контейнер. Не докосвайте вътрешната част на контейнера със спринцовката.	Поставете капака върху контейнера незабавно и го затегнете добре.	Не използвайте медицински памук, марля или други подложки, тъй като те могат да повлияят на резултатите.

Общи указания

- **Почистете и подсушете гениталиите на детето** преди вземането на пробата.
- **Винаги измивайте ръцете си** със сапун и вода преди и след вземането на проба от урина.
- **Не отваряйте стерилния контейнер** докато не сте готови да вземете пробата.
- **Използвайте подложки или колектори само** ако вашият медицински специалист ви е предоставил

такива и ви е обяснил как да ги използвате. Следвайте всички инструкции, които са ви дадени.

- **Избягвайте да докосвате вътрешната част на контейнера** и не позволявайте гениталиите на детето да докосват която и да е част от него.
- **Поставете етикет на контейнера преди вземането на пробата**, ако вашият медицински специалист ви е помолил за това.

Обобщена информация

Защо трябва да следвам внимателно инструкциите, когато използвам приспособления за вземане на уринни проби?

Правилното спазване на стъпките помага да се предотврати попадането на микроби в пробата, което прави резултатите по-надеждни.

Мога ли да използвам буркан или съд от вкъщи?

Трябва да използвате контейнера, който ви е дал вашият медицински специалист, за да съберете пробата.

Има ли значение кога събирам пробата?

Опитайте се да съберете пробата възможно най-близо до часа на вашия преглед, за да получите проба с най-добро качество.

Съвети за връщане на пробата от урина

- ✓ **Върнете пробата бързо** Занесете я на вашия медицински специалист възможно най-скоро – в идеалния случай в рамките на два часа.
- ✓ **Дръжте я на хладно** Ако не можете да доставите пробата бързо, сложете я в найлонова торбичка и я съхранявайте в хладилника, докато не успеете да го направите.
- ✓ **Проверете часовете за предаване на проби** Попитайте кога е най-късният час за предаване, за да може пробата да стигне до лабораторията още същия ден.
- ✓ **Използвайте специални стерилни контейнери** Някои контейнери съдържат прахообразен консервант и имат отбелязана линия, до която може да се налива урина. Опитайте се да напълните контейнера до линията, но ако не можете, просто съберете колкото се може повече урина.

Сканирайте тук, за да научите повече

