



TARGET

Keep Antibiotics Working



如何使用尿垫或尿袋收集尿液样本

适用于婴幼儿

尿液收集袋



1

采集样本前后
均需用肥皂
和水洗手。




2

清洁并擦干孩
子的生殖器部
位。



3

将尿布袋牢牢
地贴在生殖器
周围的皮肤
上，然后穿上
尿布。

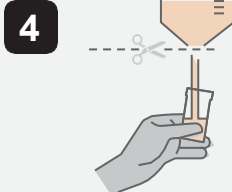

4

孩子小便完毕后，洗手，轻
轻取下尿袋，剪开一个角，
将尿液倒入无菌容器中。不
要让尿袋接触
容器内壁。



5


立即将容器盖
子盖好
并拧紧。

尿液收集垫



1

采集样本前后
都要
洗手。

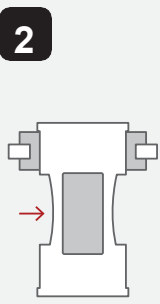


2

将尿垫放入尿布中，
让孩子像往常一样穿上尿
布。每隔 10 分钟检查一次
垫子是否湿了。不要放置尿
垫超过 30 分钟，因为这会
增加细菌进入样本的风险。




3

每隔 30 分钟更换一次尿垫，
或者如果孩子拉了便便，则更换一
次，直到孩子尿在尿垫上为止。

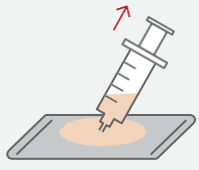

4

取下尿垫前请洗手。使用提供的注射器从尿垫
上抽取尿液，并将其转移到无菌容器中。不要
让注射器接触到容器内部。

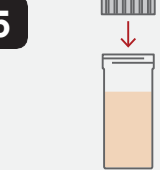

5

立即将容器盖子盖好
并拧紧。



6

请勿使用棉球、
纱布或其他任何垫
子，因为它们会影
响测试结果。

基本要点

- 采集样本前，请清洁并擦干儿童的生殖器。
- 采集尿液样本前后务必用肥皂和水洗手。
- 在准备采集样本之前，请勿打开无菌容器。
- 只有在医疗保健人员提供并解释了如何使用的情况下，

才能使用尿垫或尿袋。请听从医疗保健人员的所有指示。

- 避免触摸容器内部，并避免让孩子的生殖器接触容器的任何部分。
- 如果您的医疗保健人员要求您在采集样本前给容器贴上标签，请照做。

摘要信息

为什么在使用尿液采集用品时需要仔细阅读并遵循使用说明？

正确遵循这些步骤有助于防止细菌进入样本，从而使结果更加可靠。

我可以用家里的罐子或容器吗？

您应该使用医护人员给您的容器来收集样本。

采集样本的时间重要吗？

为了获得最佳质量的样本，请尽量在接近预约时间时，采集样本。

提交尿液样本的提示

- ✓ 尽快将样本送达至您的医疗保健服务处——最好在两小时内送达。
- ✓ 低温保存
如果不能尽快递送样本，请将其放入塑料袋中，并存放在冰箱里，直到可以递送为止。
- ✓ 查看送达时间
询问最晚送达时间，-以便样品当天就能送达实验室。
- ✓ 使用专用无菌容器
有些容器内装有防腐粉，并标有填充线。尽量装满到线，但如果不能，就尽可能多地收集尿液。

扫描此处了解更多信息

