



TARGET

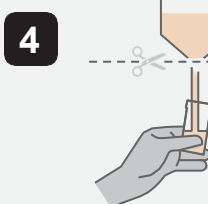
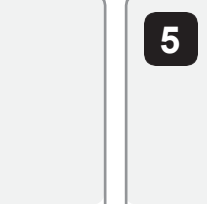
Keep Antibiotics Working



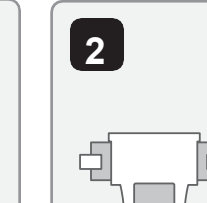
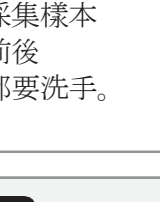
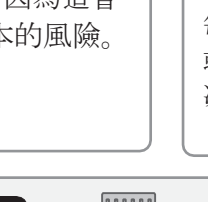
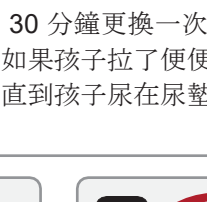
如何使用尿墊或尿袋收集尿液樣本

適用於嬰幼兒

尿液收集袋

1  採集樣本前後 均需用肥皂 和水洗手。	2  清潔並擦乾孩 子的生殖器部 位。	3  將尿袋牢牢地 貼在生殖器周 圍的皮膚上， 然後穿上尿 布。	4  孩子小便完畢後，洗手，輕 輕取下尿袋，剪開一角，將 尿液倒入無菌容器中。不要 讓尿袋 接觸容器內壁。	5  立即將容器蓋 子蓋好 並旋緊。
---	---	--	--	--

尿液收集墊

1  採集樣本 前後 都要洗手。	2  將尿墊放入尿布中， 讓孩子像往常一樣穿上尿 布。每隔 10 分鐘檢查一次 墊子是否有濕。不要放置尿 墊超過 30 分鐘，因為這會 增加細菌進入樣本的風險。	3  每隔 30 分鐘更換一次新的尿墊， 或者如果孩子拉了便便，則更換一 次，直到孩子尿在尿墊上為止。
4  取下尿墊前請洗手。使用提供的注射器從尿墊 上抽取尿液，並將其轉移到無菌容器中。不要 用注射器接觸容器內部。	5  立即將容器蓋子 蓋好並旋緊。	6  請勿使用棉球、紗布 或其他任何墊子，因 為它們會影響測試結 果。

重點

- 採集樣本前，請清潔並擦乾孩子的生殖器。
- 採集尿液樣本前後務必用肥皂和水洗手。
- 在準備採集樣本之前，請勿開啟無菌容器。
- 只有在醫療保健服務方提供並解釋如何使用的情况下，才能使用尿墊或尿袋。聽從他們的所有指示。
- 避免觸摸容器內部，並避免讓孩子的生殖器接觸容器的任何部分。
- 如果您的醫護人員要求您在採集樣本前給容器貼上標籤，請照做。

摘要資訊

為什麼在使用尿液採集設備時需要仔細閱讀並遵循使用說明？

正確遵循這些步驟有助於防止細菌進入樣本，從而使結果更加可靠。

我可以用家裡的罐子或容器嗎？

您應該使用醫護人員給您的容器來收集樣本。

採集樣本的時間重要嗎？

為了獲得最佳品質的樣本，請盡量在接近預約時間時，採集樣本。

掃描此處，了解更多資訊



提交尿液樣本的提示

- ✓ 盡快將樣本送回您的醫療保健服務處—最好在兩小時內送達。
- ✓ 低溫保存
如果您無法快速遞送樣品，請將其放入塑膠袋中，並存放在冰箱中，直到您可以遞送為止。
- ✓ 查看送達時間
詢問最晚送達時間，讓樣品當天就能送達實驗室。
- ✓ 使用專用無菌容器
有些容器內裝有防腐粉，並標示填充線。盡量裝滿到線，但如果不夠，則盡可能多地收集尿液。