



TARGET

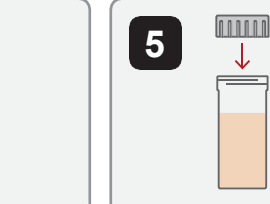
Keep Antibiotics Working



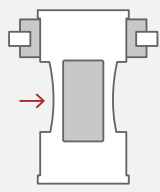
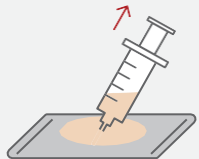
Как собрать образец мочи с помощью впитывающей прокладки или мочеприемника

Для младенцев и детей младшего возраста

Мочеприемники

1 	2 	3 	4 	5 
Вымойте руки с мылом до и после сбора образца.	Очистите и вытрите насухо область половых органов ребенка.	Надежно прижмите мочеприемник к коже вокруг половых органов, затем наденьте подгузник.	Когда ребенок закончит мочиться, вымойте руки, аккуратно снимите мочеприемник, отрежьте уголок и перелейте мочу в стерильный контейнер. Не допускайте касания мочеприемником внутренней поверхности контейнера.	Сразу же закройте контейнер крышкой и плотно закрутите ее.

Прокладки для сбора мочи

1 	2 	3 
Вымойте руки до и после сбора образца.	Поместите прокладку внутрь подгузника и наденьте его на ребенка как обычно. Проверяйте прокладку каждые 10 минут, чтобы узнать, не намокла ли она. Не оставляйте прокладку более чем на 30 минут, так как это повышает риск попадания микробов в образец.	Повторяйте процедуру с новой прокладкой каждые 30 минут (или если ребенок испражнился), пока он не помочится на нее.
4 	5 	6 
Вымойте руки перед тем, как убрать прокладку. Используйте прилагаемый шприц, чтобы набрать мочу из прокладки и перенести ее в стерильный контейнер. Не касайтесь шприцем внутренних стенок контейнера.	Сразу же закройте контейнер крышкой и плотно закрутите ее.	Не используйте вату, марлю или любые другие прокладки, так как они могут повлиять на результаты анализа.

Общие рекомендации

- **Очистите и вытрите насухо половые органы ребенка** перед сбором образца.
- **Всегда мойте руки** с мылом до и после сбора образца мочи.
- **Не открывайте стерильный контейнер** до момента готовности к сбору образца.
- **Используйте прокладки или мочеприемники только в том случае, если медицинский работник**

выдал их вам и объяснил, как ими пользоваться. Следуйте полученным инструкциям.

- **Не прикасайтесь к внутренней поверхности контейнера** и не допускайте контакта половых органов ребенка с любой его частью.
- **Нанесите маркировку на контейнер перед сбором образца**, если об этом попросил медицинский работник.

Краткая информация

Почему нужно тщательно следовать инструкциям при использовании средств для сбора образца мочи?

Правильное соблюдение этих шагов помогает предотвратить попадание микробов в образец, что делает результаты более надежными.

Могу ли я использовать банку или контейнер из дома?

Для сбора образца вам следует использовать контейнер, который вам дал ваш лечащий врач.

Имеет ли значение, когда я собираю образец?

Постарайтесь собрать образец как можно ближе к назначенному времени приема, чтобы получить образец наилучшего качества.

**Отсканируйте
здесь для
дополнительной
информации**



Рекомендации по сдаче образца мочи

- ✓ **Сдайте образец** как можно скорее — желательно в течение двух часов после сбора.

Храните образец в прохладном месте

- ✓ Если вы не можете сдать образец сразу, поместите его в пластиковый пакет и храните в холодильнике до момента сдачи.

Уточните время приема

- ✓ Узнайте, до какого времени принимают образцы, чтобы ваш анализ мог попасть в лабораторию в тот же день.

✓ **Используйте специальные стерильные контейнеры**

Некоторые контейнеры имеют консервирующий порошок и маркированную линию заполнения. Постарайтесь заполнить до линии, но если не можете, просто соберите как можно больше мочи.